




M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde **800031962**

CARROZZINA ELETTRICA PIEGHEVOLE

Manuale d'istruzione

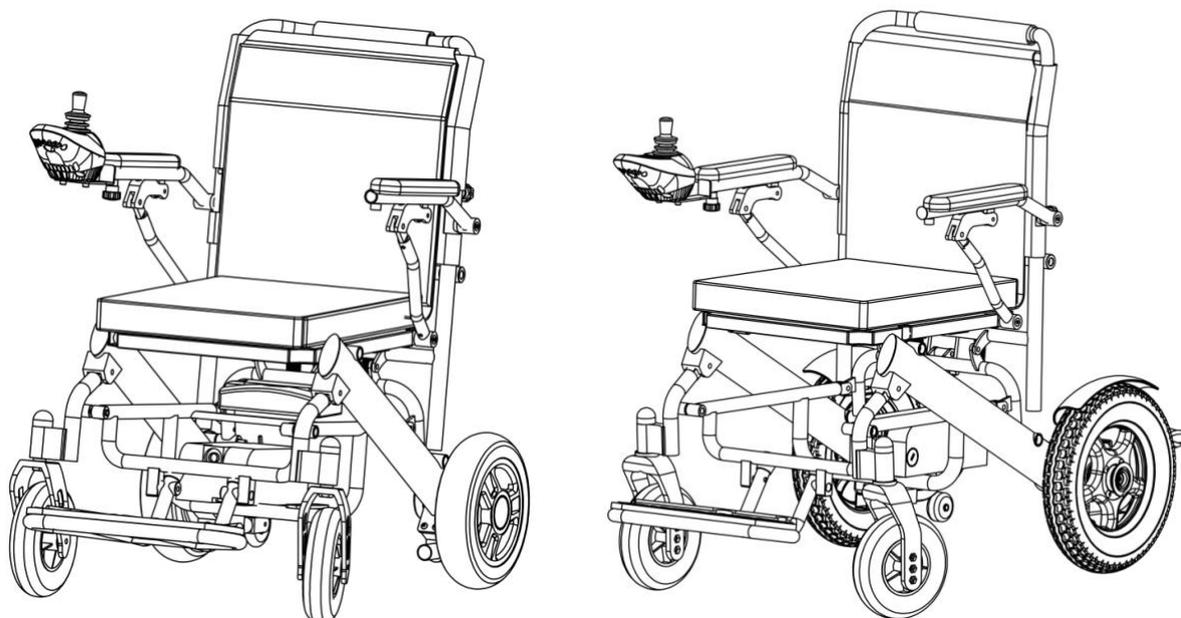



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

**PRIMA di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente questo manuale
e conservarlo per riferimenti futuri.**

Menu

<u>Direction</u>	01
<u>Segnale di sicurezza</u>	02
<u>Parametri</u>	03
<u>Struttura della sedia.</u>	04
<u>Informazioni sulle interferenze elettromagnetiche</u>	05
<u>Linee guida sulla sicurezza</u>	06
<u>utilizzo</u>	06
<u>caricatore</u>	06
<u>Ambiente operativo</u>	07
<u>Guida su strada</u>	08
<u>Precauzione guida</u>	08
<u>La sicurezza dei veicoli motorizzati</u>	08
<u>Equilibrio di guida</u>	09
<u>Attenzione quando si sale / scende dalla sedia a rotelle</u>	09
<u>Attenzione quando ci si veste sulla sedia a rotelle</u>	10
<u>Attraverso gli ostacoli</u>	11
<u>Guida retro marcia</u>	11
<u>Guida in pendenza/collina</u>	11
<u>Portata</u>	12
<u>Attenzione quando si sale e si scendono le scale</u>	12



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Installation Instruction	13
<u>Installazione cinture di sicurezza</u>	<u>13</u>
<u>Joystick installation instruction</u>	<u>14</u>
<u>Pannello Joystick</u>	<u>15</u>
<u>Spie diagnostiche</u>	<u>16</u>
<u>Joystick instruction</u>	<u>17</u>
Istruzioni per i freni	18



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Instruction per le batterie	19
<u>Instalazione</u>	<u>20</u>
<u>Carica</u>	<u>21</u>
<u>Informazione</u>	<u>21</u>
<u>Protezione da sovracorrente dispositivo</u>	<u>21</u>
<u>Pulire la presa della batteria</u>	<u>21</u>
<u>Aprire e Chiudere la carrozzina</u>	
<u>Piegare la sedia a rotelle elettrica</u>	<u>22</u>
<u>Apri la sedia a rotelle elettrica</u>	<u>22</u>
<u>Le istruzioni di garanzia</u>	23
<u>Carta di garanzia</u>	24



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

USO

Questa sedia a rotelle è azionata da un motore a corrente continua, che può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. Si tratta di un trasporto individuale per disabili e anziani. È una carrozzina elettrica compatta, leggera, pieghevole e facile da trasportare, nonché sicura e confortevole.

Precauzione



Si prega di non utilizzare questo ausilio elettrico finché non si è a conoscenza di tutte le istruzioni. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni per un uso corretto del dispositivo. Contattare il rivenditore per assistenza tecnica professionale .

Safety Symbols

The symbols below can help you identify some warnings, mandatory operation and prohibitive operation of the power wheelchair. Completely identifying and understanding them is very important.



Leggere manuale d'istruzioni



Avvertimento o suggerimento per un'operazione pericolosa che potrebbe ferire te o altri.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962



Si prega di non utilizzare telefoni cellulari, laptop o altri trasmettitori radio



Evitare pioggia, neve o ghiaccio, dovrebbe essere mantenuto in condizioni pulite e asciutte.



Prodotto tossico



Explosive



Non esporre a fiamme o scintille e così via nella fonte di calore.



Non mischiare la batteria con modelli diversi allo stesso tempo, non usare vecchi e nuovo insieme, si prega di cambiarlo completamente.



Smaltimento e riciclaggio.

Parametri

Nome del modello	0810
------------------	------



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962


Nome del modello	760mm*590mm*400mm
Capacità di peso	130kg / 180kg
Motor	
Modello	DC Brushless motor
Potenza nominale	250w*2pcs
Potenza in ingresso	DC 24V
Sistema frenante	Intelligent electromagnetic brake
Batteria	
modello	Acid lead battery
Capacità	12ah*1pc
Tensione di uscita	DC 24V
PCS	1 pezz
Controllore	Regolatore di alta qualità
Tipo/Tipo di spina	Assist type/ European standard,2 core
Tensione/corrente di ingresso	DC 24V,2A
Ruota anteriore	
Size	8"
Type	Pu tire
Ruota posteriore	
Size	10"
Type	Pu tire
Peso	
Senza batteria	32
Con batteria	38
Pendenza	12° ~15°
capacità	10km
Velocità massima	6km/h
Raggio di sterzata	800MM(31.5")
Massima capacità di ostacolo	40mm





M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde **800031962**

Struttura della carrozzina

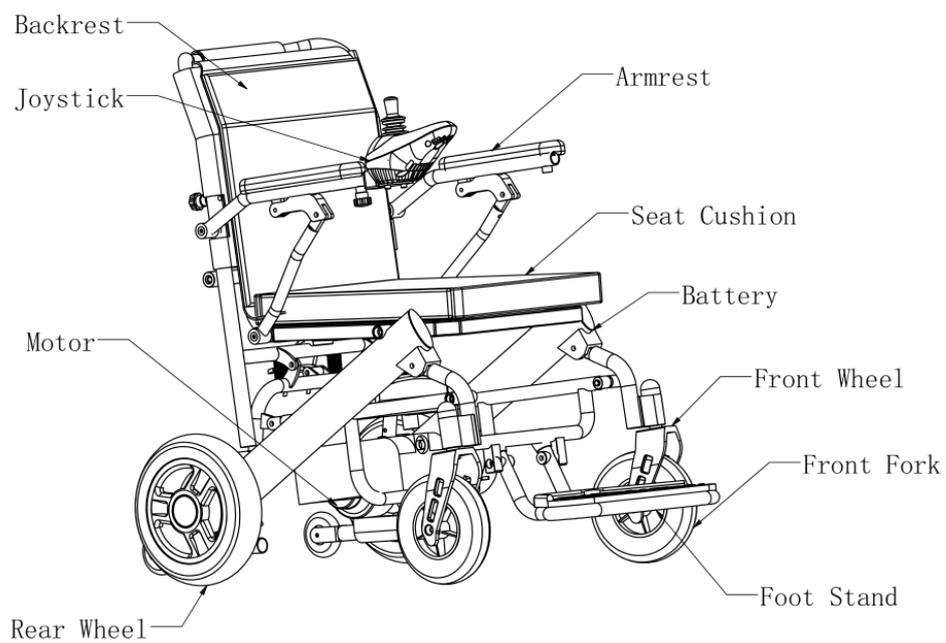



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Informazioni sulle interferenze elettromagnetiche

Cautela

Le interferenze elettromagnetiche causano molti impatti sulla sedia a rotelle elettrica, quindi leggere attentamente questo manuale .

Questo capitolo indicherà i problemi causati dall'interferenza elettromagnetica, in modo da aiutare gli utenti a comprendere e adottare le misure di protezione corrispondenti per evitare o ridurre al minimo il rischio. Alcuni contenuti riguardano gli incidenti coinvolti in particolare ambienti o condizione.

Interferenze elettromagnetiche da onde radio.

La sedia a rotelle elettrica è suscettibile alle interferenze elettromagnetiche, l'energia elettromagnetica di solito viene emessa da radio, televisione, trasmettitori radio, radio bidirezionali e dispositivi mobili. Questa interferenza elettromagnetica può causare il malfunzionamento dei freni facendo spostare da sola la carrozzina. Inoltre potrebbe portare al sistema di controllo della carrozzina elettrica danni permanenti. Quindi la capacità di un prodotto di resistere alle interferenze elettromagnetiche è particolarmente importante. La nostra carrozzina elettrica è conforme alle normative EMC, ha un'elevata capacità anti-interferenza e può resistere ad alcune comuni interferenze elettromagnetiche da radiazioni nella vita quotidiana.

Cautela

1. Sebbene questa sedia a rotelle elettrica abbia capacità anti-interferenza, gli utenti devono comunque rispettare le seguenti regole durante l'utilizzo: quando l'alimentazione è collegata, non utilizzare la radio come trasmettitore, ricevitore, banda cittadina (CB) e meglio non accendere i dispositivi di comunicazione personali come il telefono cellulare, ecc.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

2. Cerca di evitare di avvicinarti alla sorgente radio, come radio, televisione, ecc.

Manuale di sicurezza per l'utente

Prima di utilizzare questa sedia a rotelle elettrica, è necessario tenere gli strumenti e altri oggetti metallici dal positivo o dal negativo della batteria, se esposti a entrambe le estremità, causerà un cortocircuito e una scossa elettrica

1. Si prega di collaborare con l'utente e ascoltare le opinioni dei medici, infermieri o fisioterapisti dell'utente e fare un piano che sia più adatto alle capacità dell'utente.
2. Quando si spinge la sedia a rotelle elettrica con le mani, è necessario chiudere l'interruttore del freno elettromagnetico, in modo da assicurarsi che la sedia a rotelle sia stata messa in modalità manuale.
3. Quando si spinge la sedia a rotelle, è necessario utilizzare la maniglia di spinta nella parte posteriore.
4. Per evitare di ferire la schiena dell'utente, è necessario assicurarsi che l'utente sia seduto in modo corretto

Operating Environment

Caution



Questa sedia a rotelle non può essere utilizzata e posizionata in condizioni di pioggia battente, neve o ghiaccio.

1. Il contatto con acqua o umidità eccessiva può causare guasti elettrici. Telaio, motore e altre parti della sedia a rotelle elettrica non sono progettati per l'uso sotto la pioggia., Parte dell'ausilio potrebbero arrugginire o



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

subire corrosione dall'interno.

Al fine di prevenire il malfunzionamento della sedia a rotelle elettrica, queste seguente operazione sono severamente vietata.

1. Uso sotto l'acqua (come forti piogge) o posizionato e utilizzato in tale ambiente.
 2. Si prega di non utilizzare questo tipo di sedia a rotelle elettrica nella vasca da bagno, nella sauna e durante il nuoto.
 3. Si prega di non utilizzare la sedia a rotelle elettrica accanto all'acqua (come fiumi, laghi o oceano)
 4. Assicurarsi che il coperchio della batteria sia chiuso.
 5. Se il joystick è rotto, si prega di sostituirlo il prima possibile.
 6. Assicurarsi che tutti i fili siano collegati correttamente.
 7. È vietato risciacquare la sedia a rotelle elettrica. Se la sedia a rotelle elettrica è stata bagnata, estrarre la batteria il prima possibile e provare ad asciugare la sedia a rotelle elettrica e assicurarsi che la batteria sia asciutta quando viene riutilizzata.
-
1. Se è necessario utilizzarlo su una superficie bagnata o scivolosa, si prega di fare attenzione e andare avanti lentamente.
 1. Devi assicurarti che sia sicuro farlo.
 2. Se una o due ruote principali perdono trazione, è necessario fermarsi immediatamente nel caso in cui la sedia a rotelle sia fuori controllo.
 3. Se c'è neve, ghiaccio, acqua o olio sulla pista o sulla rampa, per favore non cercare di superare.
 4. Quando non sai se è sicuro muoversi o meno, chiedi aiuto.
 5. Si prega di spegnere l'alimentazione quando non si utilizza, metterlo in un luogo asciutto e pulito dopo una carica completa.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962



Condizioni stradali

1. La sedia a rotelle elettrica è adatta solo per cemento, asfalto e superficie interna del pavimento.
2. Non utilizzare nella sabbia, o terreno accidentato sporco grossolano, in caso di danni a ruote, cuscinetti, parti dell'albero o del motore, così come gli elementi di fissaggio allentati possono verificarsi.



Guidare su strada

Nella maggior parte dei paesi e delle regioni, la guida della sedia a rotelle elettrica sulle strade riservate ai veicoli è vietato..

L'utente deve rendersi conto che guidare una sedia a rotelle su strada o nel parcheggio è pericoloso.

1. Per un facile riconoscimento durante la notte, un articolo riflettente viene incollato sulla sedia a rotelle elettrica (figura A3). L'utente può anche indossare gli abiti con funzione riflettente di notte.
2. Quando ti confronti con altri veicoli, assicurati che il conducente ti abbia notato. Prima di continuare a operare, stabilire un contatto visivo con il conducente e far sapere al conducente la propria intenzione fino a quando non si è sicuri che sia sicuro.



La sicurezza dei veicoli motorizzati

1. Non cercare di guidare la sedia a rotelle elettrica quando sei su veicoli di trasporto, come autobus, metropolitana, treni, aerei, navi, ecc.
2. Quando si guida una sedia a rotelle elettrica su veicoli pubblici, si prega di essere accompagnati.
3. Se si utilizza la sedia a rotelle elettrica da sola nei veicoli pubblici, si prega di cercare un luogo in cui la sedia a rotelle o le ruote possano essere fissate, in modo da evitare danni causati dal freno improvviso del veicolo o dall'incidente stradale.
4. Non posizionare la sedia a rotelle elettrica nella parte anteriore di altri veicoli, in modo da non interferire con gli altri conducenti.
5. Quando si sale o si scende, se è necessario sollevare l'utente con la sedia a rotelle, si prega di afferrare il bordo del telaio del sedile, non tenere il corrimano o lo schienale della sedia per sollevare.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

GUIDA SICURA

AVVERTENZE

Durante la guida, la sedia a rotelle elettrica deve essere mantenuta in equilibrio.

I fattori che influenzano l'equilibrio del centro di gravità.

1. Altezza e angolo del sedile.
2. La posizione e la postura dell'utente o la variazione della distribuzione del peso.
3. La rampa o la pendenza del percorso.
4. Sia che si utilizzi uno zaino o altri oggetti per modificare il peso totale della sedia a rotelle e la distribuzione del peso.

Si prega di consultare i fabbricanti prima di modificare o regolare la sedia a rotelle elettrica.



Attention!

1. Evita di guidare la sedia a rotelle elettrica indossando abiti lunghi.
2. Assicurarsi che gli indumenti non si attacchino alle ruote prima di iniziare a guidare la sedia a rotelle.

Attraverso gli ostacoli

È necessario superare alcuni ostacoli nell'uso quotidiano, tra cui soglia, ascensore, rampa, pozzi e pavimentazione rota, ecc.





M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Attenzione!

La soglia è molto pericolosa. Anche un piccolo cambiamento di altezza potrebbe bloccare la ruota e rendere la sedia a rotelle inclinata e ribaltata.

1. Smontare il davanzale o coprire il gradino con un'apposita rampa.
Quando si sposta la sedia a rotelle elettrica, si prega di guardare intorno all'area con attenzione dove si passerà.
1. Assicurati che quando usi la sedia a rotelle elettrica, puoi superare gli ostacoli con la pendenza in modo fluido e sicuro.
2. Puoi regolare il tuo centro di gravità in questo modo.
Quando stai superando un ostacolo, inclina leggermente in avanti la parte superiore del corpo.
Quando stai attraversando una strada che va dall'alto verso il basso, per favore appoggiati indietro nella parte superiore del corpo.



Attention!

RETRO MARCIA

1. Quando si guida la sedia a rotelle elettrica in retro marcia, è necessario essere più attenti. Se le ruote posteriori colpiscono un oggetto, perderai il controllo o cadrai.
2. Durante la guida, dovresti rallentare.
Fermati e controlla frequentemente per assicurarti che non ci siano ostacoli pericolosi sulla strada che attraverserai.

Guida in pendenza/collina



Attention!

Sulla salite, l'equilibrio della gravità della tua sedia a rotelle elettrica cambierà.

"Pendenza" può essere una rampa o una collina. Se non si è sicuri della sicurezza quando la sedia a rotelle elettrica utilizzata una salita, si prega di utilizzarla con l'aiuto di altri, non usarla da sola.

1. Quando la pendenza è superiore a 10°, si prega di non utilizzare sedie a rotelle.
2. Quando si è sul pendio scivoloso (come neve, ghiaccio, acqua o olio), si prega di non utilizzare.
3. Quando la pendenza è su e giù (ondulata, convessa o concava), si prega di non utilizzare.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Portata

Caution

1. Il carico massimo di questa carrozzina elettrica è di 150 kg. Quando lo si utilizza, il carico non deve essere superato.
2. La capacità di carico dello schienale è inferiore a 75 kg, si prega di non premere o sollevare lo schienale.
3. In ogni caso, si prega di non fare alcun allenamento con i pesi su questa sedia a rotelle e assicurarsi che il peso totale del caricatore sia inferiore alla capacità di carico massima della sedia a rotelle.
4. Quando il carico supera la capacità di carico massima, i danni saranno causati al sedile, al telaio, agli elementi di fissaggio, alla piegatura, ecc., Possono anche causare gravi danni all'utente stesso o causare danni irreparabili.
5. I problemi causati dal sovraccarico non sono garantiti.

Attenzioni quando si sale e si scende le scale

Caution

Questa sedia a rotelle elettrica non è adatta per le scale o sulla scala mobile.

Prestare attenzione alle seguenti precauzioni quando si utilizza l'ascensore.

1. Non utilizzare la sedia a rotelle sulle scale mobili per evitare lesioni gravi.
2. L'ascensore può essere utilizzato quando si è seduti sulla sedia a rotelle. Spingere la sedia a rotelle nell'ascensore quando la porta viene aperta. Assicurarsi che la porta sia aperta durante lo spostamento della sedia a rotelle.

Se l'utente desidera spostare la sedia a rotelle elettrica tra i piani tramite scale, è necessario chiedere l'aiuto di un secondo operatore.

1. Spostare l'utente dalla sedia a rotelle elettrica.
2. Piegare la sedia a rotelle elettrica. Prima di piegare, il joystick deve essere tolto. Si prega di fare riferimento al capitolo "spedizione".
3. Spostare la sedia a rotelle elettrica quando si sposta su e giù per le scale, è necessario prestare attenzione per evitare la collisione.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Installazione della cintura di sicurezza

La cintura di sicurezza viene utilizzata per fissare il corpo dell'utente e impedire all'utente di scivolare dal sedile. Ma non può proteggerti nell'incidente.

La cintura di sicurezza può essere regolata in base alle esigenze dell'utente.

La cintura di sicurezza viene utilizzata per sostenere l'utente e per impedire all'utente di scivolare in avanti.

Installazione della cintura di sicurezza:

1. L'utente deve assicurarsi che la cintura di sicurezza sia legata insieme intorno alla vita e nella la parte inferiore dello schienale della sedia.
2. Dopo esserti seduto, inserisci la spina di plastica nella chiusura, fino a quando non senti un suono di clic.
3. Regolare la cintura di sicurezza alla lunghezza appropriata, non stringere troppo.

Caution



Attention!

1. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la cintura di sicurezza sia fissata correttamente e sia adatta all'utente.
2. Prima di ogni utilizzo, verificare se la cintura di sicurezza è allentata o danneggiata. Se riscontri un problema, contatta il fornitore per la manutenzione o la riparazione.




M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Joystick Controller

Installation

Il controller del joystick può essere installato su entrambi i lati sinistro e destro secondo necessità.


1. Allineare il foro del blocco di supporto con il foro sul telaio del bracciolo. (Figura A 1)
2. Fissare il joystick in una posizione comoda fissando il bullone di gomma. (Figura A 2.)
3. Collegare la spina del joystick con la spina della batteria per ottenere l'alimentazione elettrica (due parti rosse come mostrato in Figura A 3)

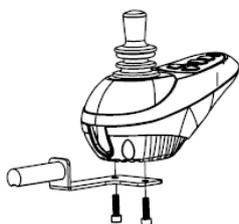

(Figure A1)



(Figure A2)

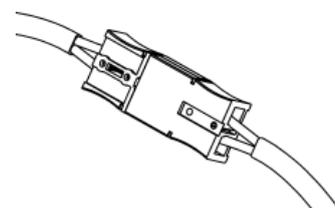

(Figure A3)

Caution



1. Avvitare il dado per ridurre il rischio di collisione, caduta.
 2. Controlla e regola le impostazioni ogni sei mesi.
 3. Se trovi qualche impostazione che ha cambiato alcune funzioni, contatta il fornitore.
1. Quando la sedia a rotelle si ferma, anche in un breve periodo di tempo, assicurati che l'alimentazione sia spenta, al fine di evitare che tu o altri tocchiate accidentalmente il joystick per causare movimenti imprevisti.




M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

- Assicurati che gli altri, incluso qualcuno che ti aiuta (ad esempio, il commesso) sappiano come usare il joystick.

Pannello Joystick

- Pulsante di accensione / spegnimento: premere questo pulsante accendi / spegni l'alimentatore
- Pulsante Accelera: premi questo pulsante per accelerare. La velocità massima è di 6 km / h (3,75 miglia all'ora)
- Pulsante di rallentamento: premere questo pulsante per ridurre la velocità
- Pulsante del corno: premi questo pulsante e il clacson suonerà
- Indicatore luminoso di carica della batteria: mostra la carica della batteria
- Direzione (joystick): il joystick controlla la direzione della sedia a rotelle, controlla il joystick nella direzione in cui vuoi andare.
- Indicatore luminoso diagnostico velocità/informazioni: la velocità è divisa in cinque sezioni, classificate in base alla velocità massima del 20%,40%,60%,80%,100%.

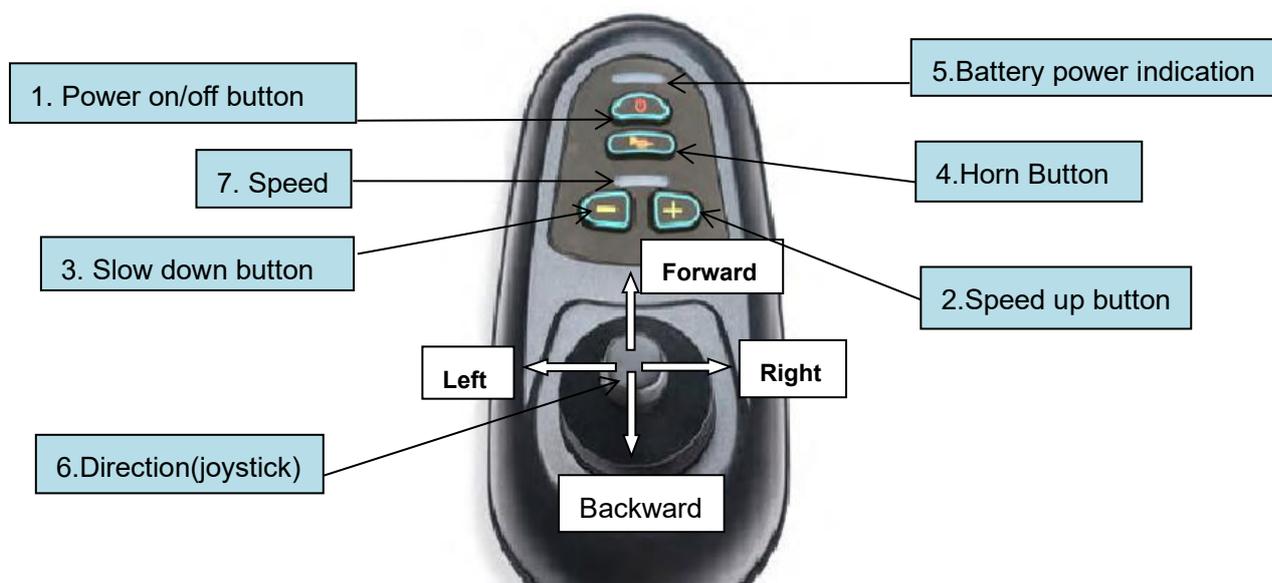



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Spie diagnostiche

problema	Descrizione problema	Spiegazione & Soluzione
Tutte le luci a LED non sono accese e nessun suono	L'alimentazione è spenta, in modalità standby o sospensione. La connessione all'alimentazione non è buona. Il fusibile viene espulso.	Verificare se la connessione è allentata o disconnessa. Se la connessione è buona, consultare il centro di assistenza per la manutenzione.
Tutte le luci a LED sono accese	L'alimentazione è accesa e l'autodiagnosi viene superata, la sedia a rotelle elettrica può funzionare bene.	Meno numero di luci a LED, meno potenza della batteria
La luce LED rossa più a sinistra è accesa con un suono allarmante.	La carica della batteria è estremamente limitata.	Meglio caricare presto. O forse la batteria si spegnerà
Due brevi segnali acustici, la luce di indicazione della potenza lampeggia due volte	Il motore laterale sinistro è un malfunzionamento.	La connessione del cavo del motore sul lato sinistro è allentata o scollegata.
Tre brevi segnali acustici, la luce di indicazione della potenza lampeggia tre	Il freno laterale sinistro è malfunzionante.	La connessione del freno laterale sinistro è allentata o l'interruttore di spegnimento del freno non funziona



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

volte		correttamente.
Quattro brevi segnali acustici, potenza indication light flickers quattro volte	Il motore laterale destro è disfunzione.	La connessione del filo del motore sul lato destro è allentato o scollegato.
Cinque brevi segnali acustici, la luce di indicazione della potenza lampeggia cinque volte	Il freno laterale destro è un malfunzionamento.	La connessione del freno laterale destro è allentata o l'interruttore di spegnimento del freno è un malfunzionamento.
Six short beeps, power indication light flickers six times	Il controller è in stato di protezione sovracorrente	Controllare il freno e il motore per diagnosticare se sono bloccati. Controllare la corrente con l'amperometro, se non la corrente eccessiva, forse il controller è un malfunzionamento.
Sette brevi segnali acustici, la luce di indicazione della potenza lampeggia sette volte	Joystick non funzionante	Joystick hall is not reset, or the connector is loose or disconnected.
Otto brevi segnali acustici, la luce di indicazione della potenza lampeggia otto volte	Il controller non funziona.	Si prega di consultare il centro di assistenza per la manutenzione.
Nove brevi segnali acustici, la luce di indicazione della potenza lampeggia nove volte	Il controller non funziona	Si prega di consultare il centro di assistenza per la manutenzione.

Istruzioni per joystick



Attention!

Se si ignora l'avviso, potrebbe causare l'inclinazione della sedia a rotelle e danni o lesioni all'utente.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Il joystick può controllare la direzione senza intoppi. È dotato di mobilità a 360 °, facile da usare. C'è una molla nel joystick, quindi può tornare automaticamente al centro dello stato iniziale.

Spingere il joystick nella direzione in cui si desidera andare. Il joystick ha una capacità di controllo proporzionale. La velocità è limitata entro 6 km/h (3,75 miglia all'ora)

Se vuoi rallentare, rilascia il joystick. La sedia a rotelle rallenterà automaticamente per fermarsi e correggere la direzione nell'intervallo minimo.

Quando si utilizza per la prima volta questa sedia a rotelle, è necessario operare a bassa velocità e spingere leggermente il joystick in avanti. Questo esercizio ti aiuterà a imparare come controllare la sedia a rotelle passo dopo passo, farti sapere e avere familiarità con come controllare e padroneggiare con successo i metodi di guida della sedia a rotelle elettrica.

Guidare la sedia a rotelle elettrica, si prega di fare come segue:

1. Regolare il pannello di controllo sulle impostazioni appropriate.
2. Accendere l'alimentatore. Si prega di fare riferimento alla sezione precedente su "premere il pulsante di accensione / spegnimento".
3. Spostare il joystick come segue

Directions	Joystick movements
Forward	Move the joystick forward
Backward	Move the joystick backward
Right	Move the joystick to the right
Left	Move the joystick to the left
Stop	Release the joystick, wheelchair will automatically slow down until stop.

Istruzioni per i freni




M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962


Dopo qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione, assicurarsi che tutte le parti degli accessori siano installate ermeticamente prima dell'uso, altrimenti potrebbe causare danni.

Passare dalla modalità manuale alla modalità di alimentazione:


1. Spegnerne l'alimentazione o frenare prima la sedia a rotelle, quindi estrarre la frizione dalla scanalatura e ruotarla, la sedia a rotelle passerà alla modalità manuale. (Figura B1)
2. Ruotare la frizione e rimetterla in scanalatura, spingere leggermente la sedia a rotelle per sentire un suono di clic, la sedia a rotelle torna alla modalità di alimentazione. (Figura B2)

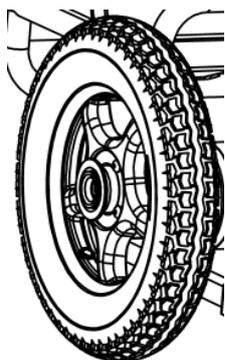


(Figure B1)

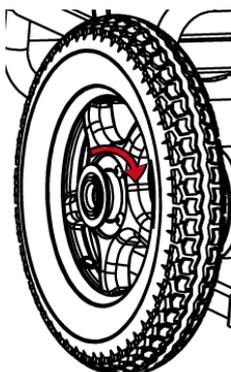

(Figure B2)

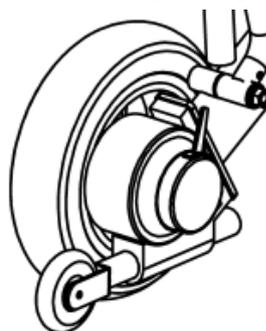

(Figure B3)

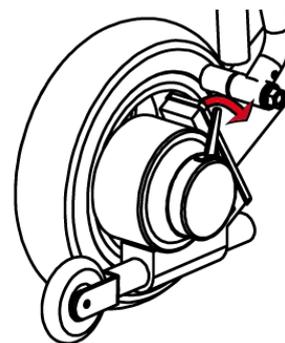

(Figure B4)



Attention!

Quando si passa dalla modalità manuale alla modalità di alimentazione, verificare che entrambe le frizioni laterali siano all'interno delle scanalature. Qualsiasi frizione laterale non è completamente in scanalatura, può causare il pericolo di ribaltamento.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Istruzioni per la batteria

- 

Non utilizzare batterie con capacità diverse, marche diverse e tipi diversi. Sostituire il comando batteria completamente, non mescolare le batterie vecchie e nuove.
- 

Il metallo o certi tipi di materiali conduttivi non possono essere utilizzati per collegare il positivo e negativo della batteria. Potrebbe creare un cortocircuito, e una scossa elettrica causando alcuni danni accidentali.
- 

Non avvicinarti a materiali infiammabili. Non avvicinarti o esporre alla fonte di calore, ad esempio incendi o scintille, ecc. Non trasportare la batteria con materiali infiammabili o combustibili insieme.
- 

Ci sono alcune sostanze chimiche corrosive nella scatola della batteria, lo smontaggio della batteria è vietato.
- 

Non cortocircuitare le batterie o gettare la batteria nel fuoco, in modo da evitare incidenti di esplosione.

Caution

1. Non provare a utilizzare pinze o cavi per collegare direttamente le estremità della batteria.
2. Non usare la sedia a rotelle quando è in carica.
3. Non utilizzare alimentatori non standard (ad esempio: generatore o inverter).
4. Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato, estruso e gravemente piegato, specialmente nella porta. Evitare che il cavo di alimentazione venga strappato e annodato.
5. Tieni i bambini e gli animali domestici lontani dal cavo di alimentazione, non lasciarli mordere e masticare. Quando si estrae il cavo di alimentazione, tenere premuta la spina.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Se l'interruttore (freno dell'assicurazione del circuito) è scattato molte volte durante la ricarica, si prega di scollegare immediatamente i caricabatterie e contattare il rivenditore o il personale tecnico professionale.

In questa guida, tutta la garanzia e le prestazioni si riferiscono alle batterie al piombo..

Non fumare o accendere vicino alla batteria.

È vietato utilizzare la batteria in ambienti troppo caldi o troppo freddi.

Install/Remove the Battery




Attention!


Assicurati che l'alimentazione della sedia a rotelle sia spenta prima di eseguire queste azioni.

1. Installare la batteria


1. Spingere la batteria nella scatola della batteria orizzontalmente come mostrato nella Figura C1
2. Collegare le spine della batteria con le spine del motore e del controller (Figura C2).

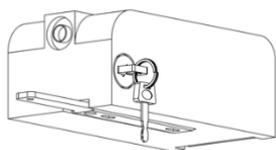


(Figure C1)

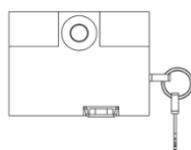

(Figure C2)

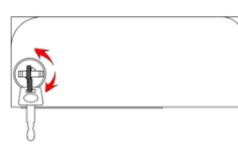



(Figure C3)

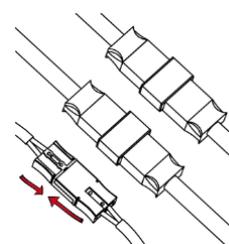


(Figure C4)

1. Rimuovere la batteria.

1. Scollegare i connettori del motore e del controller. (Figura D1)
2. Slacciare le cinture di sicurezza. (Figura D2)
- Estrarre la batteria dalla scatola della batteria tirando la maniglia della batteria. (Figura D3-4)

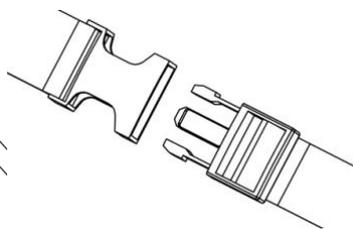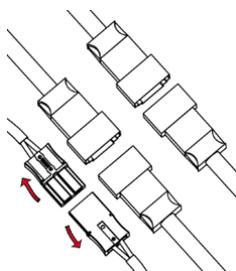

2

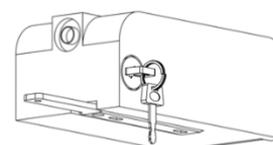



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

(Figure D1)


(Figure D2)

(Figure D3)

(Figure D4)

Caricare la batteria

1. Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta prima di caricare.
2. Utilizzare la corrente alternata standard disponibile per la ricarica. Inserire il connettore del caricabatterie nella bocca di ricarica sotto il pannello del controller per la ricarica. (Come mostrato in figura E1).
3. Quando l'indicatore rosso è acceso, mostra che è in carica. Il tempo di ricarica consigliato è di circa 4-5 ore. (figura E1)
4. Dopo che l'indicatore luminoso del caricabatterie passa da rosso a verde, quindi continuare a caricare per 30 minuti, in modo da garantire la carica completa. Scollegare prima la presa di alimentazione esterna del caricabatterie, quindi scollegare la presa del pannello di controllo.
5. È vietato utilizzare la batteria in ambienti troppo caldi o troppo freddi.
6. Ricarica in tempo quando la potenza è carente.
7. Caricare spesso la batteria, purché venga utilizzata la sedia a rotelle elettrica. Si prega di caricare la batteria dopo l'uso fino a quando non è pieno. Se non si utilizza la sedia a rotelle per un lungo periodo, si prega di ricaricarla ogni 2 mesi, ogni volta a circa l'80% dell'elettricità. La batteria si danneggia, se non ha carica per un lungo periodo.
8. Se si utilizza la batteria con specifiche, tensione e capacità errate, ciò danneggerà la sedia a rotelle elettrica e la sedia a rotelle elettrica non può riprodurre le migliori prestazioni ed effetti.

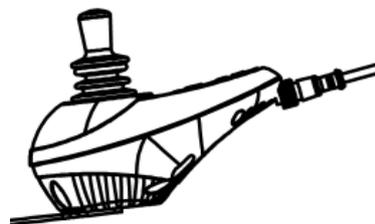



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Dispositivo di protezione da sovraccarico

Quando la batteria della sedia a rotelle elettrica è esaurita, il dispositivo di protezione da sovraccarico proteggerà la batteria da scariche eccessive. Gli utenti dovrebbero prestare attenzione a, quando il dispositivo di protezione da sovraccarico è attivato, la velocità massima si ridurrà.

Dispositivo di protezione da sovracorrente

La sedia a rotelle elettrica è inoltre dotata di un dispositivo di protezione da sovracorrente. Se la corrente fornita al motore è finita, il fusibile elettronico chiuderà la corrente.

Se si verifica un malfunzionamento durante la guida, il dispositivo di protezione da sovracorrente verrà avviato, le ruote motrici smetteranno di ruotare per evitare che il motore venga danneggiato dal surriscaldamento.

Pulire la batteria



Attention!

1. Pulire accuratamente la polvere con strumenti asciutti.
2. Non toccare i materiali della batteria con la pelle.
3. Tenere la batteria lontana da materiali infiammabili, altrimenti potrebbe danneggiare te o altri durante la pulizia.

Piegare e aprire la sedia a rotelle

Dopo qualsiasi regolazione, riparazione o manutenzione, assicurarsi che tutte le parti degli accessori siano installate ermeticamente, altrimenti potrebbe causare danni.

Prima di piegare o aprire la sedia a rotelle, assicurarsi che l'alimentazione sia stata spenta.

1. Piegare la sedia a rotelle

1. Scollegare tutti i connettori della batteria, del controller e dei motori come mostrato nella Figura F1
 2. Ruotare e allentare la vite per abbattere il controller. (Figura F2)
 3. Sbloccare il blocco sicuro sul retro della sedia a rotelle come mostrato nella Figura F3.
 4. Allentare il blocco sotto il bracciolo, quindi sollevare il bracciolo come mostrato nella Figura F4.
 5. Rimuovere i cuscini.
 6. Piegare il cavalletto come mostrato nella Figura F5.
- Piegare la sedia a rotelle spingendo lo schienale sul telaio del sedile, come mostrato nella Figura F6.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

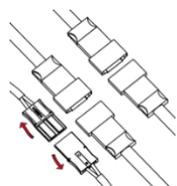


Figure F1



Figure F2

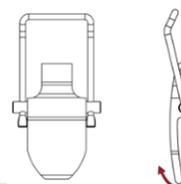


Figure F3



Figure F4



Figure F5

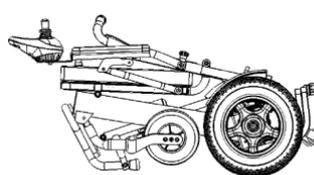


Figure F6

2. Aprire/installare la sedia a rotelle

1. Smontare lo schienale con il telaio del sedile per aprire la sedia a rotelle. (Figura G1)
 2. Fissare la parte fissa sul retro della sedia a rotelle come mostrato nella Figura G2. Questo passaggio è molto importante! La dimenticanza o il mancato fissaggio di questa parte sicura è molto pericolosa e potrebbe causare lesioni durante la guida.
 3. Apri il cavalletto. (Figura G3)
 4. Metti giù il bracciolo e ruota il lucchetto sotto il bracciolo per bloccare il bracciolo. (Figura G4)
 5. Imposta i cuscini.
 6. Installare il controller fissando la vite. (Figura G5)
- Collegare le spine del controller e dei motori alle spine della batteria. (Figura G6)
-



Figure G1



Figure G2



Figure G3

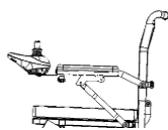


Figure G4



Figure G5

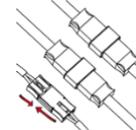


Figure G6

Garanzia



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Garanzia valida:

1. La garanzia del telaio principale è di 2 anni.
1. Il joystick motore/batteria/controller sono garantito per 6 mesi.

La garanzia non copre :

1. Qualsiasi malfunzionamento causato da uso improprio, distruzione artificiale.
 2. Danni dovuti a carico eccessivo o pezzi di ricambio aperti senza autorizzazione.
 3. Le parti consumabili (come: set di batterie, cuscino del sedile, pneumatico, bordo laterale, cuscino del bracciolo ecc.) non sono in garanzia.
-
1. Impressione soggettiva, nessun problema di funzione.
 2. Perdita di utilizzo e invecchiamento (rivestimento e superficie di placcatura, dissolvenza naturale delle resine, ecc.).

Garanzia Non applicabile quando si verificano le seguenti situazioni:

1. Mancanza di manutenzione regolare
2. Manutenzione impropria o errata.
3. Funzionamento diverso dal manuale o sovraccarico
4. Modifiche non autorizzate
5. Fattore esterno come: fuliggine, prodotti farmaceutici, piogge acide, pietra volante, polvere metallica ecc.
6. Disastri naturali come: tifoni, inondazioni, incendi, terremoti ecc.

I clienti prestano attenzione seguendo le precauzioni

Affinché la garanzia sia valida, i clienti hanno l'obbligo di seguire le seguenti precauzioni:

1. Testare e guidare correttamente la sedia a rotelle elettrica come istruzioni manuali.
2. Controllo giornaliero. Implementazione dei suggerimenti di controllo suggeriti dalla nostra fabbrica.



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde 800031962

Scheda di assistenza post-vendita

Card Holder:		Contact No.:		Model:	
Add:				Date Of Manufacturer:	
Height:	Weight:	Joystick Position:	Serial NO.:		
<p>Garanzia di qualità:</p> <p>Il prodotto acquistato ha goduto del seguente servizio di garanzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motore, controller, batteria ha 6 mesi di garanzia; durante il periodo di garanzia la manutenzione gratuita. 2. Telaio principale: 2 anni di garanzia. 3. Fornire il servizio di manutenzione, le spese del servizio di manutenzione della porta dovrebbero essere addebitate, le tariffe in base alla distanza. 					
servizio	Registrazione del		Date		
			Description		

Packing list

Item	Quantity
Power Wheelchair	1
Charger	1



M.I.A. MEDICAL ITALIA SRL Via del casale della caccia 116 00128 RM Numero verde **800031962**

After Sales Service Card	1
User Manual	1