

## Dati tecnici Inovys II

larghezza totale	larghezza sedile	larghezza da piegata	angolo sedile	angolo schienale	altezza bracciolo	altezza sedile	altezza totale	lunghezza totale	profondità sedile	altezza appoggio gambe
630	400	-	10°/120°	0°/54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520	400-570
680	450	-	10°/120°	0°/54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520	400-570
730	500	-	10°/120°	0°/54°	220-320	460-530	1020-1200	1010-1050	460-520	400-570

In temperanza alla normativa crash test ISO 7176-19

Sono possibili delle differenze nelle dimensioni e nel peso (1,5mm e 1,5kg).


larghezza totale	stabilità statica in salita	ruote diretrici	ruote posteriori	peso kg	portata massima
550-585	15°	200	16"/22"/24"	36	135
550-585	15°	200	16"/22"/24"	36	135
550-585	15°	200	16"/22"/24"	36	135

## Opzioni

- Spinte laterali
- Bracciolo per emiplegico
- Tavolino in legno



## Colori

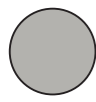

C55  
Inox

## È la carrozzina ad adeguarsi a voi, non il contrario

La carrozzina è stata sviluppata per essere un ausilio adattabile alle esigenze individuali, garantendo anche estetica e praticità. All'interno di tale evoluzione la Vermeiren ricopre un ruolo importante.

Il nostro principio di base è che la carrozzina si deve adattare a Voi e non il contrario, ecco perché le nostre carrozzine sono modulari. Tutti i tipi di carrozzina possono essere adattati e dotate di numerosi accessori intercambiabili tra di loro. Questo è il risultato delle nostre attività di ricerca e di 55 anni di esperienza.

## La vostra garanzia di qualità

Per quanto riguarda la qualità, la carrozzina Inovys II soddisfa le norme più esigenti imposte dagli Istituti di collaudo riconosciuti nella maggior parte dei Paesi Europei

E.R.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmeitout - Belgio - 05/2012



## Reatime s.r.l.



Viale dell'Industria 5/7  
20020 Arese (MI)  
Italia

Tel.: (0039) 02997707  
Fax: (0039) 0293585617

[www.reatime.it](http://www.reatime.it) - [info@reatime.it](mailto:info@reatime.it)



**VERMEIREN**  
Mobilità illimitata

Per maggiori informazioni potete contattare il fornitore a voi più vicino.



Informazioni per i non vedenti è disponibile su richiesta.



modèle pour démonstration uniquement

Mobilità illimitata



# Inovys II

# Inovys II



**Colori**



## Modello Inovys II

Carrozzina con possibilità di regolazioni multiple.

- Regolazione dei braccioli in larghezza / altezza
- Regolazione della profondità della seduta
- Regolazione delle pedane in larghezza
- Possibilità di abbassare la carrozzina senza modificare le ruote
- In alternativa possibilità di schienale tensionabile



Facile da trasportare



Appoggiatesta regolabile in rotazione e traslazione laterale



Braccioli estraibili, regolabili in altezza e larghezza. Sedile regolabile in profondità



Due pedane posizionate nella parte posteriore favoriscono il superamento degli ostacoli

Maniglie di spinta regolabili in altezza



Tavolino in legno ribaltabile



Bracciolo per emiplegico (su richiesta)



Spinte laterali (su richiesta)

Nuovo sistema di fissaggio della pedana per un lungo e durevole utilizzo

**NEW**

Regolazione dell'inclinazione

Comoda leva per l'estrazione della pedana

Sedile in mousse a memoria media

Appoggiapolpacci imbottito e regolabile

Cinturino fermatallon

Piatto pedana con regolazione della tibio-tarsica

**RIF. CODICE ISO**  
18.09.18.012  
18.09.18.202  
18.09.18.205

**AGGIUNTIVI/ACCESSORI**  
18.09.18.214 18.09.18.223  
18.09.18.220 18.09.18.211  
18.09.18.235

**NR. REPERTORIO**  
133232/R